


Idexx-integration i Agitura Journal

VIKTIGT! Idexx har tekniska begränsningar vilket gör att man måste ange DXXXXX-numret UTAN det inledande D:et (dvs endast det 6-siffriga numret som följer D) från Agitura i ett av följande fält i sin Idexx-maskin, för att integrationen ska fungera (notera att ingen annan text får anges i det fält man väljer):


- Djurets namn
- Djurets ID
- Ägarens förnamn
- Ägarens efternamn

För att aktivera Idexx-integrationen i Agitura krävs följande steg:


- 1) Konsultera er Idexx-kontakt för att få Idexx Interlink installerat på den dator ni vill att provsvaren från era maskiner ska skickas till.
- 2) Navigera till "IDEXX VetLab Station" i programmet, bocka i "Yes" på "Save XML messages" och fyll i sökvägen i "Save PDF Messages" och i "Save XML Messages" till katalogen där ni vill att provsvaren ska sparas. Observera att båda måste peka på samma katalog på datorn. Innan ni stänger programmet så kopiera sökvägen ni angivit, så ni sedan kan ange den i Agitura Journal:

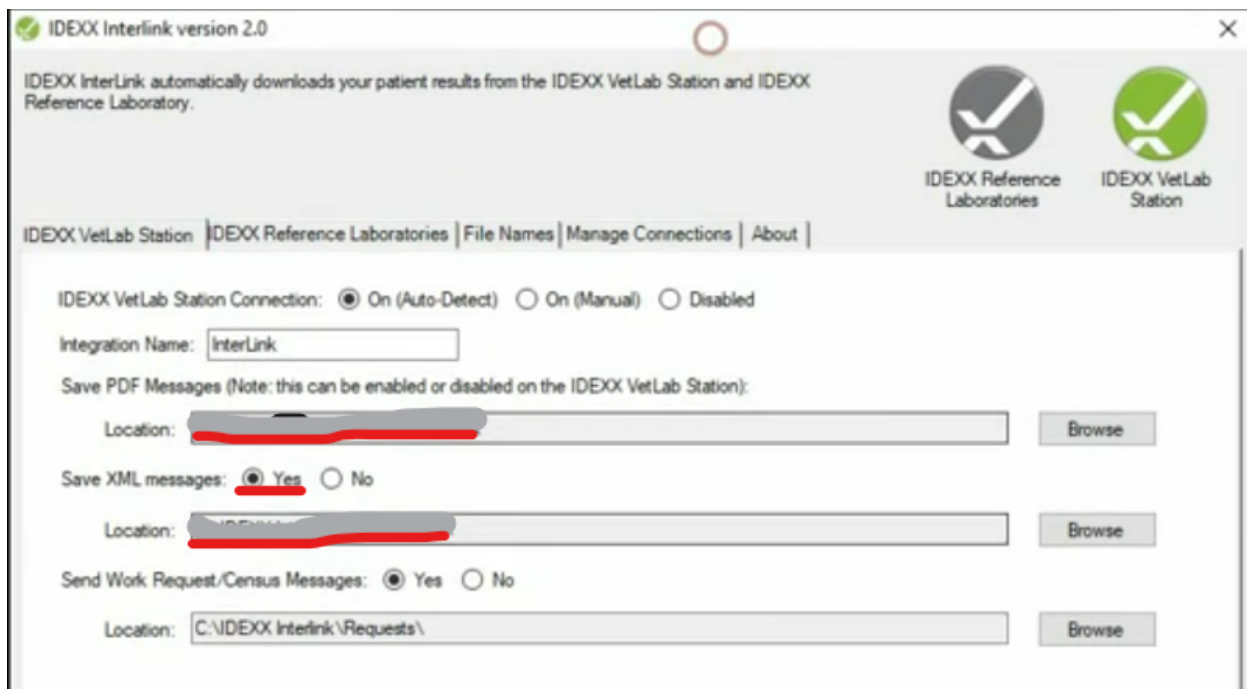

3) Starta Agitura Journal och navigera till Kugghjulet > Lab > Idexx:

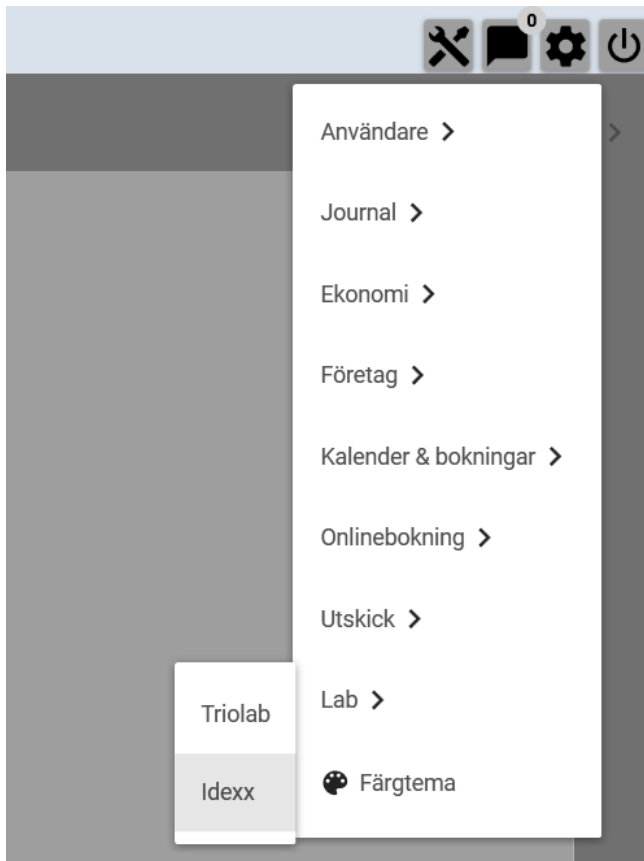

4) Bocka för “Aktivera Idexx-integration”, klistra in samma sökväg som ni angav i Idexx Interlink-programmet, klicka på “Spara” och starta sedan om Agitura Journal:

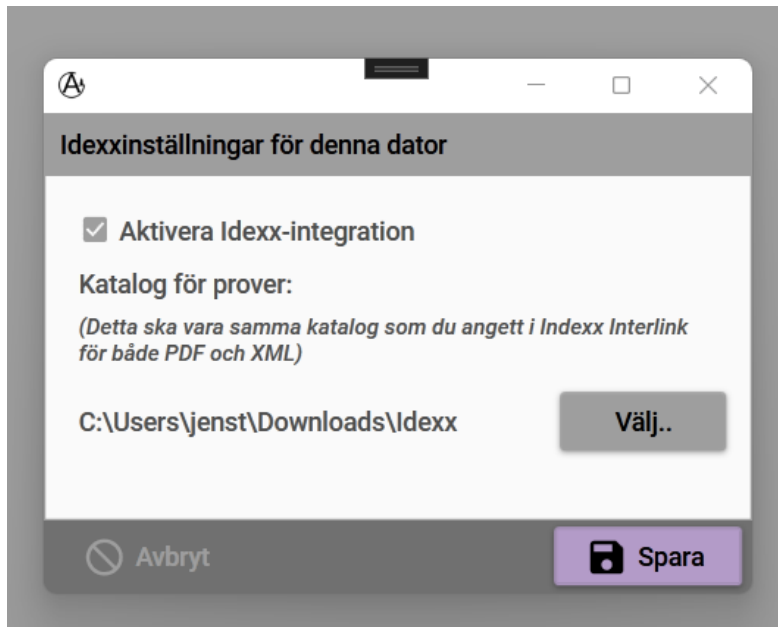

OBS! Vi på Agitura äger ingen Idexx-maskin, och denna integration är därför gjord med hjälp av snälla kunder som bidragit med sin tid och kunskap. På grund av detta kan integrationen innehålla buggar. Skulle ni använda integrationen och hitta sådana, så skicka gärna ett mail med så mycket information som möjligt om det till oss, så ska vi göra så gott vi kan för att åtgärda problemen!